

SEIDIGYN®

GEL LUBRICANTE ÍNTIMO

Alivia la sequedad vaginal y favorece las relaciones sexuales.
Uso externo.

Seidigyn® lubricante vaginal es un gel de uso externo con base acuosa no hormonal formulado para aliviar los síntomas de la sequedad vaginal y favorecer así las relaciones sexuales.

Se trata de un gel inodoro, incoloro, con una consistencia similar a las secreciones vaginales fisiológicas que hidrata y lubrica la zona íntima reduciendo la fricción durante las relaciones sexuales sin alterar la integridad del preservativo.

La **sequedad vaginal** [vulvar y otras molestias relacionadas] afecta a un gran número de mujeres. Generalmente se acompaña de síntomas característicos: sensación de irritación, picor, escozor y dolor durante las relaciones sexuales [dispareunia].

Dichos síntomas se pueden producir:

- En cualquier circunstancia que provoque alteración de los niveles estrogénicos (hormonales) en la mujer: embarazo, post-parto, lactancia, toma de anticonceptivos hormonales, menopausia, quimio y radioterapia, intervenciones quirúrgicas vaginales y medicamentos.
- En casos de hipersensibilidad local: estrés, intolerancia a jabones y desodorantes, ropa interior sintética o ajustada.

Seidigyn® lubricante vaginal se utiliza para el alivio de los síntomas mencionados, asociados a la atrofia y sequedad vaginal y genital.

Seidigyn® es compatible con las mucosas y mantiene el pH vaginal en sus niveles fisiológicos. No contiene hormonas ni ingredientes químicos agresivos.

La textura gelatinosa de **Seidigyn®** forma una película lubricante sobre la superficie de la mucosa vaginal. Esta textura facilita también una cómoda aplicación sobre la zona perineal (abertura vaginal, zona genital externa) y sobre la vulva, para mejorar la sequedad.

Al mismo tiempo, la consistencia lubricante de **Seidigyn®** favorece las relaciones sexuales. Es compatible con el uso de preservativos.

Seidigyn® lubricante vaginal no deja manchas tras su aplicación vaginal o sobre los genitales externos.

Posología

Aplicar una pequeña cantidad antes de las relaciones sexuales. Puede repetirse la aplicación si se considera necesario.

Ingredientes

Hidroxietilcelulosa 2%, Glicerol, Propilenglicol, Goma xantana, Fenoxietanol, Ácido benzoico, Ácido dehidroacético, Inulina, Agua purificada e Hidróxido sódico.

Contraindicaciones

El uso del producto está contraindicado en casos de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes. En caso de presentarse alguna reacción alérgica suspender de inmediato el uso del producto.

Efectos adversos

No se han descrito.
Si presenta algún efecto adverso después de su uso consulte con su farmacéutico.
Puede notificar los incidentes adversos a través del portal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do> y enviando un email al departamento de farmacovigilancia farmacovigilancia@labseid.com.
Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse a Seid, S.A. enviando un email al departamento de farmacovigilancia farmacovigilancia@labseid.com y a la autoridad competente Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

Instrucciones de conservación

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Mantener el tubo bien cerrado, alejado de fuentes de calor directa.

Advertencias y precauciones

- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua.
- Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.

- Usar solo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- No utilizar en caso de que el envase esté dañado.
- Pueden utilizarlo las mujeres embarazadas y/o madres lactantes según lo recomendado por su médico o farmacéutico.
- **Seidigyn® lubricante vaginal** no es un anticonceptivo y no contiene espermicidas. No evita el embarazo ni las enfermedades de transmisión sexual.
- Cuidemos del medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado depositándolo en el Punto SIGRE  de la farmacia.

Presentación

Tubo de aluminio de 30 g.


Modo de utilización

Lavarse las manos antes y después del uso.

En el envase de **Seidigyn®** encontrará:

- tubo de aluminio con 30 g de gel.

1. Desenroscar el tapón del tubo de **Seidigyn®**, invertirlo y utilizar la punta aguda para romper el precinto del tubo.
2. Apretar el tubo y colocar una pequeña parte del gel en los dedos.
3. Esparcirlo por toda la zona externa de la vagina o bien sobre el preservativo una vez puesto para hacer más placentero el contacto sexual.
4. Se podrá usar de nuevo antes de la siguiente relación sexual.

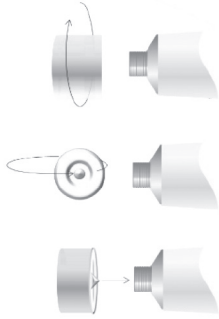

Sobredosificación

No existe riesgo asociado a la sobredosificación del producto. En caso de sobredosificar, eliminar con un pañuelo.

Revisión del texto: Febrero 2023

 **Seid, S.A.**
Ctra. de Sabadell a Granollers, km 15.
08185 Lliçà de Vall - Barcelona (España).

 No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso.

 Consultense las instrucciones de uso.

 Código de lote.

 Fecha de caducidad.

 Identificador único del producto

 Seidylube 30 g



 0051

SEIDIGYN®

INTIMATE LUBRICANT GEL

Relieves vaginal dryness favouring sexual intercourse.
External use.

Seidigyn® vaginal lubricant gel is a watery base non-hormonal intimate lubricant gel for external use formulated to help alleviate the symptoms of vaginal dryness, thus favoring sexual intercourse.

Seidigyn® is an odourless, colourless gel with a similar consistency of physiological vaginal secretions, which hydrates and lubricates the genital area reducing friction during sexual intercourse and without compromising condom's integrity.

Vaginal dryness (vulvar and other related disturbances) affects a large number of women. It is usually accompanied by characteristic symptoms such as irritation, vaginal itching and painful intercourse (dyspareunia).

These symptoms may appear:

- In any circumstances causing alterations of estrogenic levels (hormone) in women: pregnancy, post-partum, breastfeeding, contraceptive intake, menopause, chemo or radiotherapy, vaginal surgery and medicines.
- In cases of local hypersensitivity: stress, soap or deodorants allergies or those produced by synthetic or tight underwear.

Seidigyn® intimate lubricant gel is used for the relief of the above mentioned symptoms, which are associated to atrophy and genital dryness. It is respectful with vaginal mucosa and maintains its pH at physiological balance.

It does not contain neither hormonal nor chemical aggressive ingredients.

The soft texture of Seidigyn® forms a lubricant film over the genital surface, providing a comfortable, dryness-relieving feeling when applied over the perineum (vaginal opening, external genital area) and over the vulva.

The lubricant effect of Seidigyn® favours sexual intercourse and it is compatible with the use of condoms.

Seidigyn® vaginal lubricant does not leave stains after vaginal application or over the external genitalia.

Posology

Spread a small amount before each sexual intercourse. Application may be repeated if necessary.

Ingredients

Hydroxyethylcellulose 2%, Glycerol, Propylene glycol, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Inulin, Purified water and Sodium hydroxide.

Contraindications

The product is contraindicated in case of known hypersensitivity to any of its components. Stop using the product in case of hypersensitivity reactions.

Side effects

Not described.

If you suffer any possible side effect while using this product, consult your doctor or pharmacist. Adverse events can be notified through Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios portal <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do> and sending an email to farmacovigilancia@lab-seid.com. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to Seid, S.A. sending an email to farmacovigilancia@lab-seid.com and to the competent authority Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios portal <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

Conservation instructions

- Do not use the product after the expiry date printed on the package.
- Keep the tube closed and away from close contact with heat sources Do not eat.
- Avoid any contact with eyes. In case of accidental contact wash thoroughly with water.
- Keep the product out of the sight and the reach of children.
- Use the product only according to the instructions
- Do not use if the package is damaged.
- Pregnant women and nursing mothers can use the product as recommended by the doctor or pharmacist.
- **Seidigyn® vaginal lubricant** is not a contraceptive and does not contain spermicides. Not prevent pregnancy or sexually transmitted diseases.
- Take care of the environment. Do not throw the packaging in the

Pack size


Aluminium tube containing 30 g of gel.

How to use

Wash your hands before and after using it.

In a Seidigyn® pack you will find an aluminium tube containing 30 g of gel.

1. Unscrew the tube cap turn it down and use the sharp point to perforate the tube's seal.
2. Press the tube so as to release a small amount of gel on your fingertip.
3. Spread the gel over the external intimate area - or over the condom, once it has been put in place, in order to make sexual intercourse more pleasant.
4. The product can be repeatedly applied before each continuous sexual intercourse.

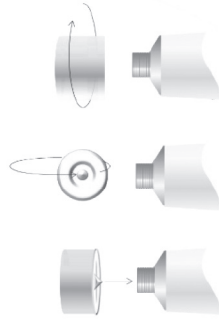

Overdosage

There are no risks specifically associated with the overdosage of the product. In case of overdosage remove the excess with a tissue.

Date of last revision: February 2023



Seid, S.A.
Ctra. de Sabadell a Granollers, km 15.
08185 Lliçà de Vall - Barcelona (Spain).



Do not use if package is damaged and consult instructions for use.



Consult instructions for use.



Batch code.



Use-by date.



Unique device identifier

Seidylube 30 g



0051